



Сделано в Швейцарии
ИННОВАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



АКУШЕРСКИЙ ГЕЛЬ -
БЫСТРЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ
РОДЫ БЕЗ РАЗРЫВОВ

DIANATAL®
obstetric gel


СОЗДАН, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ РОДЫ, УМЕНЬШИТЬ ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,
МИНИМИЗИРОВАТЬ БОЛЬ И ТРАВМЫ ДЛЯ МАМЫ И МАЛЫША.

Диаклон®
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

+7 (495) 225-33-44
www.diaclon.net



АКУШЕРСКИЙ ГЕЛЬ
ДИАНАТАЛ®
БЫСТРЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ
РОДЫ БЕЗ РАЗРЫВОВ

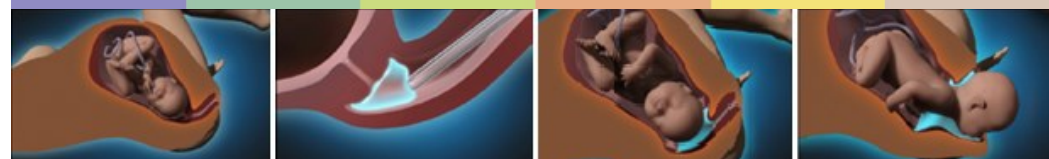


ДИАНАТАЛ - чтобы помочь!

Рождение ребёнка - один из важнейших моментов в жизни женщины. Положительный опыт прохождения родов также положительно сказывается не только на физическом, но и как следствие на эмоциональном состоянии матери и ребёнка, сокращая случаи послеродовой депрессии и боязни вторых родов, облегчая восстановление. Акушерский гель Дианатал® разработан специально для облегчения естественных родов за счёт облегчения прохождения ребёнка по родовым путям и защиты влагалища и промежности от разрывов и травм, тем самым экономя силы и энергию мамы, которые ей потребуются, чтобы насладиться долгожданным моментом встречи с малышом.

Как действует гель ДИАНАТАЛ®?

Статическое трение во время схваток Динамическое трение во время выталкивания

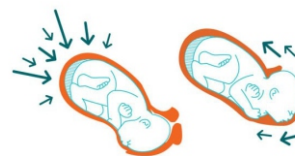

Акушерский гель Дианатал® облегчает процесс родов за счёт создания обволакивающей плёнки на поверхности родового канала, способствующей уменьшению трения (как статического, так и динамического) между влагалищем и ребёнком и позволяющей ему легче продвигаться по родовому каналу. Таким образом происходит сокращение времени второго периода родов на 30%. Уменьшение боли свидетельствует об уменьшении вагинальных микроповреждений и разрывов влагалища и промежности, тем самым уменьшается частота вагинальных оперативных вмешательств, в том числе эпизиотомии. Всё это позволяет сберечь силы матери и новорожденного.

Преимущества и свойства геля

- Стерильные индивидуально упакованные одноразовые ампулы с гелем;
- без запаха;
- почти бесцветный;
- очень вязкий;
- биоадгезивный;
- электропроводящий (проводимость выше 5 мСм);
- не пирогенный;
- слабощелочной (pH 5,5 – 6,5);
- без латекса, фталатов и консервантов;
- Не повреждает слизистые оболочки и глаза;
- полностью биосовместим и гипоаллергенный;
- Совместим с проведением кесарева сечения, вакуум-экстракции и применением акушерских щипцов.

Способ применения геля ДИАНАТАЛ

1. Наносите ~3 мл геля начиная с первого вагинального осмотра с интервалом ~1-3 часа. В зависимости от ситуации, нанесение может быть сделано вручную. В случае нечастого вагинального осмотра акушерский гель Дианатал® следует применять независимо от вагинального осмотра каждые 2-3 часа.
2. Во время второго периода родов наносите гель после каждого вагинального осмотра с интервалом ~15 минут. В зависимости от ситуации, применение можно сделать вручную или с помощью аппликатора.
3. После разрыва плодных оболочек: наносите дополнительную дозу геля Дианатал® в течение ~15-30 минут, чтобы заменить смытый гель.
4. Как только головка ребёнка показалась, необходимо подготовить чистое сухое полотенце для предотвращения выскальзывания ребенка.

СБЕРЕЧЬ СИЛЫ • УСКОРИТЬ РОДЫ • УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ