

DC ΔιαΚλον®





ЗАО «ДиаКлон®» — российская инновационная компания, основанная в 1993 году и специализирующаяся на разработке, производстве и реализации одноразового гинекологического инструментария, а также стерильных хирургических и диагностических перчаток.

На сегодняшний день — это мобильная, соответствующая требованиям рынка компания, имеющая все необходимые производственные площадки и современное оборудование, позволяющие не только производить широкий спектр медицинских изделий, но и постоянно внедрять в производство новые оригинальные продукты, отвечающие высоким стандартам качества.

На данный момент компания производит медицинские изделия одноразового применения:

- зеркала влагалищные по Куско, размеры S, M, L;
- наборы гинекологические «Фемина®»;
- инструменты гинекологические;
- перчатки медицинские.

ЗАО «ДиаКлон®» — это единственная в России компания-производитель медицинских перчаток, которые могут защитить руки хирурга от случайных порезов скальпелем. Эти перчатки выпускаются под торговой маркой «Кольчужные®». Такие перчатки незаменимы при проведении операций у необследованных пациентов в системе скорой помощи, а также при работе с особо опасными инфекциями (ВИЧ, гепатит). Перчатки «Кольчужные®» можно использовать многократно.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ ISO 13485–2017 (ISO 13485:2016). Продукция соответствует стандартам качества и безопасности Российской Федерации.

ЗАО «ДиаКлон®» является надежным партнером для тех, кто ценит качество, полностью соответствующая своей миссии — способствовать безопасному будущему людей.



НАБОР ИЗДЕЛИЙ «ФЕМИНА®» для забора отделяемого шейки матки и влагалища

РАЗМЕРЫ



Предназначен для использования в гинекологических отделениях медицинских лечебно-профилактических учреждений, женских консультациях, кожно-венерологических диспансерах, лечебно-диагностических медицинских центрах, специализирующихся в области гинекологии, санаторно-курортных учреждениях гинекологического направления для осмотра и взятия материала при проведении диагностических исследований и лечения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ НАБОРА*:

- Зеркало влагалищное по Куско;
- Инструмент для взятия мазка (зонды уrogenитальные различных типов:
 - шпатель гинекологический;
 - ложка Фолькмана 3D;
 - цитощетка;
 - цервикальная щетка и т.п.);
- Перчатки медицинские диагностические;
- Подстилка (салфетка).

*Возможны различные виды комплектации по желанию заказчика.

Наборы «Фемина®» позволяют провести процедуру осмотра легко и безболезненно. При большом потоке пациентов помогут врачу максимально быстро и эффективно произвести все необходимые манипуляции. Данное медицинское изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

Размер зекала	Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
S	60	3,3	580x390x230
M		3,5	
L		3,8	



ЗЕРКАЛА ЗВК– «ДиаКлон» влагалищные полимерные по Куско

РАЗМЕРЫ



Зеркала предназначены для расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики, лечения профилактических гинекологических осмотров. Все зеркала полимерные, имеют анатомическую форму, снабжены многоступенчатой системой фиксации с помощью кремальеры. Зеркала выпускаются трех размеров S, M и L. Упакованы в герметичную упаковку, одноразовые, стерильные. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских ЛПУ;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления



Размер зеркала	Цвет фиксатора	Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
S	Красный	105	3,6	580x390x230
M	Зеленый		4,3	
L	Сиреневый		4,4	



ЗЕРКАЛА ЗВК– «ДиаКлон» влагалищные полимерные по Куско с защитой


РАЗМЕРЫ




Зеркало с защитой разработано для улучшения обзора при проведении осмотров, операций и лечебных процедур у женщин с пролапсом стенок влагалища. Защита выполнена из синтетического или натурального латекса. Все зеркала полимерные, имеют анатомическую форму, снабжены многоступенчатой системой фиксации с помощью кремальеры. Выпускаются двух размеров М и L. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских ЛПУ;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления

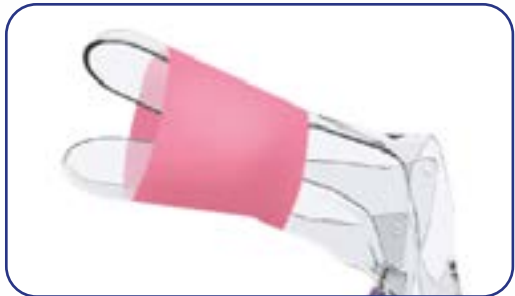

Размер зеркала	Цвет фиксатора	Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
M	Зеленый	105	4,3	580x390x230
L	Сиреневый		4,4	

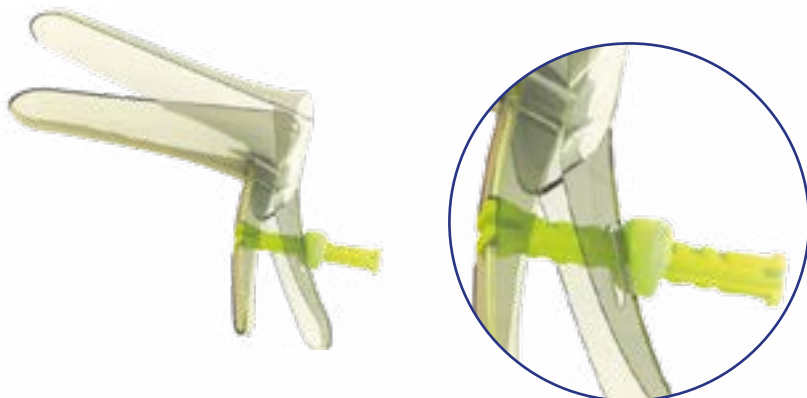

ЗЕРКАЛО ВЛАГАЛИЩНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ одноразового применения стерильное по Куско «Золотое»

РАЗМЕР

M


Предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и лечения. Применяется в акушерско-гинекологической практике для проведения профилактических гинекологических осмотров. Зеркало полимерное прозрачное, универсальное, форма створок анатомическая. Золотистый цвет зеркала дает антибликовый эффект, что облегчает диагностику рака влагалища и создает возможность для диатермокоагуляции и лазерной терапии. Фиксация с помощью поворотного-винтового устройства «твист-фиксатор» увеличивает скорость приема. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских ЛПУ;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления



Размер зеркала	Цвет фиксатора	Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
M	Зеленый	105	4,1	580x390x230

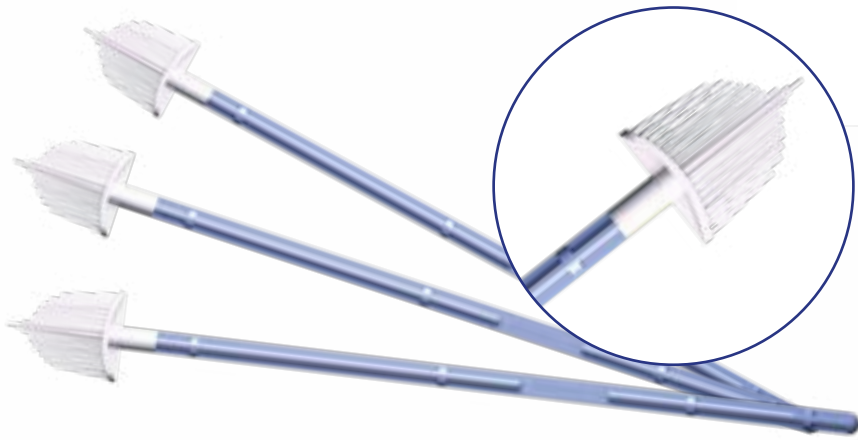

ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ЩЕТКА «ДиаСкрин®»

гинекологическая для цитологического исследования
одноразового применения стерильная


Предназначена для взятия соскоба со всей поверхности шейки матки и из цервикального канала: с наружной части шейки матки (клетки экзоцервикса), с зоны трансформации (Т-зоны), из цервикального канала (клетки эндоцервикса). По форме рабочая часть цервикальной щетки «ДиаСкрин®» соответствует контуру шейки матки и представляет собой мягкую и гибкую щёточку из трапециевидных пластиковых щетинок различной длины. Самые длинные средние щетинки захватывают глубокие участки цервикального канала, более короткие щетинки соприкасаются с участками наружной части шейки матки и зоной трансформации. Гибкость щетинок щёточки позволяет легко собрать клетки со всей поверхности шейки матки и цервикального канала, предотвращая при этом повреждения тканей. Цервикальная щетка особенно эффективна для цитологического скрининга рака шейки матки. Полученный материал можно не только наносить непосредственно на предметное стекло, но также использовать для жидкостной цитологии. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских ЛПУ;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления



Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
1000	5,7	580x390x230

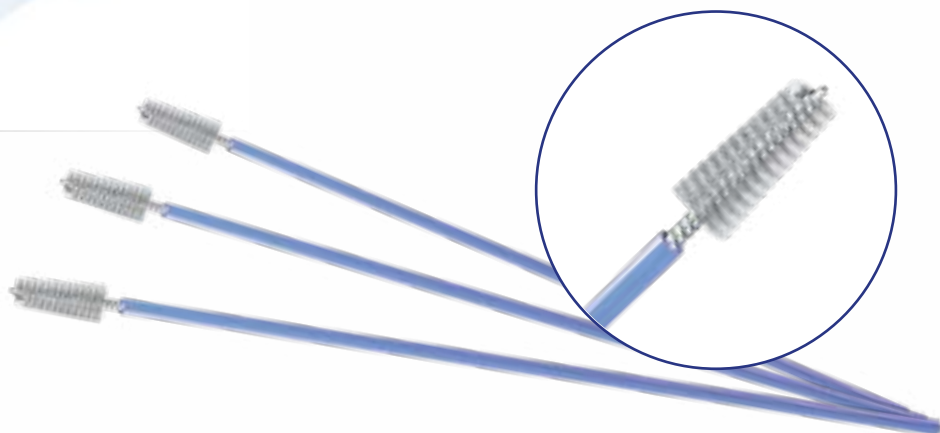

ЦИТОЩЕТКА «ДиаТест»

одноразового применения стерильная
гинекологическая для цитологического исследования


Предназначена для взятия соскоба из цервикального канала шейки матки (клетки эндоцервикса). Рабочая часть цитощётки в виде конической щётки со спиральным расположением инертных щетинок изготовлена из стальной проволоки и нейлоновой нити. Цитощётка имеет атравматичный закругленный конец, исключающий риск повреждения тканей. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских ЛПУ;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления



Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
1000	5,7	580x390x230

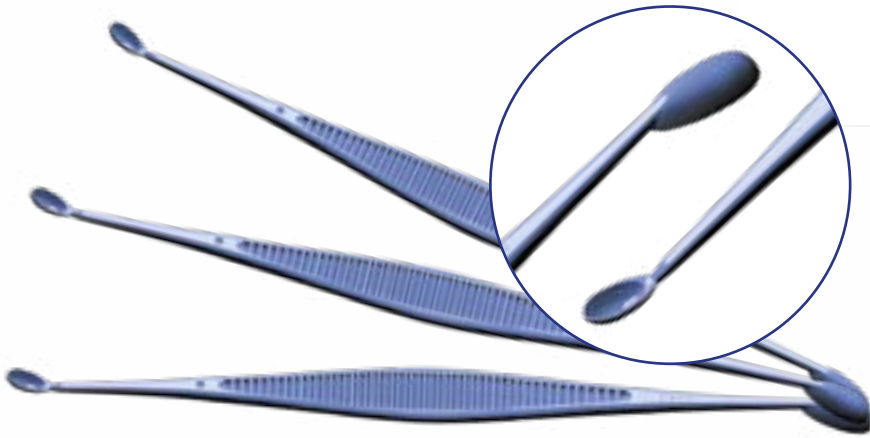

ЛОЖКА ФОЛЬКМАНА 3D

гинекологическая двухсторонняя
одноразового применения стерильная


Предназначена для взятия мазков на бактериологическое исследование со слизистой влагалища, шейки матки и уретры. В отличие от других плоских урогенитальных полимерных ложек форма инструмента классическая (модификация имеет рабочие концы развернутые относительно друг друга на угол 180°), что дает возможность без проблем отобрать одну за другой две пробы материала из разных локусов, а специальный изгиб чашеобразных концов позволяет легко и быстро отобрать и полностью перенести на предметное стекло или питательную среду пробу материала. Наличие градуировки на рабочих концах ручки позволяет контролировать глубину погружения в цервикальный канал. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских ЛПУ;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления



Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
1000	6,7	580x390x230

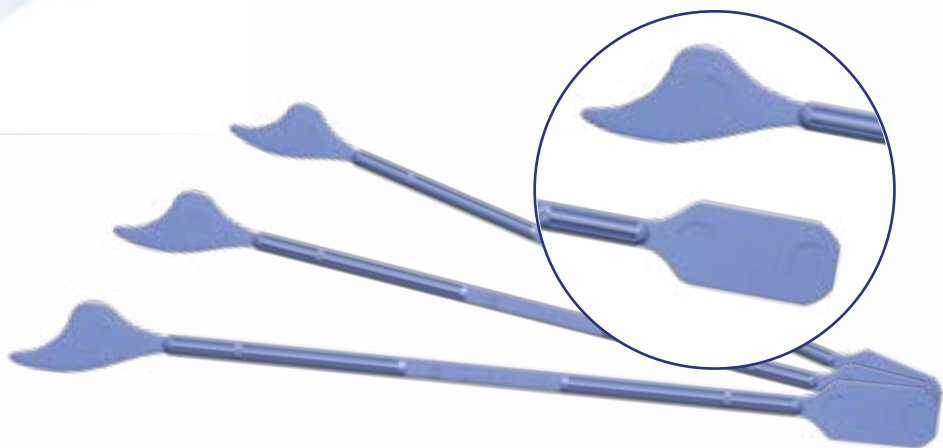

ШПАТЕЛЬ ШГ — «ДиаКлон» гинекологический полимерный двухсторонний (по Эйру) одноразового применения стерильный

Предназначен для взятия мазков на цитологическое исследование с влагалищной части и канала шейки матки, на бактериологическое исследование со слизистой влагалища и шейки матки. Инструмент имеет два рабочих конца различной формы: один повторяет контур шейки матки и идеален для отбора материала на цитологическое исследование, другой (в форме лопатки) — для отбора материала со слизистой влагалища и шейки матки на бактериологическое исследование. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гинекологические и онкологические отделения в медицинских ЛПУ;
- Гинекологические консультации;
- Онкологические диспансеры;
- Лечебно-диагностические медицинские центры;
- Санаторно-курортные учреждения гинекологического направления.



Количество в транспортном коробе, шт	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
1000	4,2	580x390x230



ПЕРЧАТКИ «Кольчужные®» хирургические защитные синтетические

РАЗМЕРЫ



Предназначены для усиленной защиты рук от порезов при работе с пациентами, инфицированными вирусами гепатита В, С и ВИЧ. Использование уникального синтетического волокна обеспечивает превосходную стойкость к порезам и защиту во время проведения процедур с высоким риском получения травмы и дает минимально возможное снижение чувствительности. Перчатки не защищают от проколов. Многократового использования, снабжены ярлыком для контроля количества стерилизаций. Перчатки «Кольчужные®» следует надевать на руки поверх латексных или синтетических хирургических перчаток. Поверх перчаток следует также надевать латексные или синтетические хирургические перчатки. Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Больницы и институты скорой медицинской помощи;
- Стоматологические поликлиники;
- Бюро судмедэкспертизы;
- Патологоанатомическое бюро;
- Инфекционные отделения больниц;
- Родильные дома и другие медицинские учреждения в случаях возникновения риска инфицирования.



Размер зеркала	Цвет оверлока манжеты	Количество в транспортном коробе, пар	Масса брутто транспортного короба, кг	Размеры транспортного короба, мм
S (6–6,5)	Красный	150	4,2	580x390x230
M (7–7,5)	Зеленый			
L (7,5–8)	Белый			



ГЕМОБЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

местный жидкий гемостатик

1% водный раствор неполной серебряной соли полиакриловой кислоты

ФЛАКОНЫ, мл

15

20

30

50

- Высокая гемостатическая активность
- Эффективен при ДВС-синдроме, гемофилии, приеме антикоагулянтов
- Повторные кровотечения отсутствуют
- Не влияет на функцию гемостаза в общем кровотоке
- Антисептический эффект
- Действует независимо от состояния свертывающей системы крови
- Отсутствие нейротоксичности
- Высокий регенерирующий эффект
- Биологическая безопасность

- Эндоскопия и эндохирургия
- Акушерство и гинекология
- Абдоминальная хирургия
- Постоперационный уход
- Сосудистая хирургия
- Гнойная хирургия
- Отоларингология
- Офтальмология
- Нейрохирургия
- Травмотология
- Стоматология
- Проктология
- Урология
- Ожоги



Применение в гинекологии: эндометриоз, полостные и лапароскопические операции, кесарево сечение, эпизиотомия, разрывы маточные, влагалища и промежности, кровотечения из шейки матки, внутриматочные и послеродовые кровотечения, а также кровотечения паренхимы малого женского таза.

Средство гемостатическое «Гемоблок» за счет наличия в составе наночастиц серебра, обладает регенерирующим, бактерицидным, противовирусным и противогрибковым действием. Применяется наружно, прямым нанесением на пораженный участок кожи или слизистой, либо смачиванием тампонов (марлевых носителей) с последующим наложением на кровоточащую поверхность. Возможно применение методом орошения через ирригационный канал эндоскопа. Гемостатический эффект достигается в течение 1-2 минут. При взаимодействии с белками плазмы крови гемостатический раствор формирует полимерный комплекс (сгусток) после чего наступает гемостаз с формированием гладкой эластичной поверхности.

DC Диаклон®



Россия, 140081, Московская область, г. Лыткарино, ул. Советская, 13
Тел: +7 (495) 555-23-45, 555-33-44, 225-33-44
E-mail: info@diadon.net
www.diadon.net